


시공 / 사용 설명서

1. 설치상의 주의사항

- 장애자는 몸의 균형을 스스로 유지하지 못하고, 전 체중을 본 손잡이에 의지하여 기구를 사용하므로 시공방법에 따라 견고하게 고정하여야 합니다.
- 본 제품은 현장 조립 설치 방식이므로 연결부의 조립시 볼트로 강하게 조여 흔들림이 없도록 하여야 합니다.
- 본 제품이 설치되는 바닥, 벽 부분은 반드시 붉은 벽돌이나 콘크리트로 시공되어야 견고하게 고정할 수 있습니다. 시멘트 벽돌이나 시멘트 블록으로 시공된 곳은 고정이 불가 하므로 설치상 주의 하십시오.


2. 시공 방법

※ “Ø9드릴” 사용

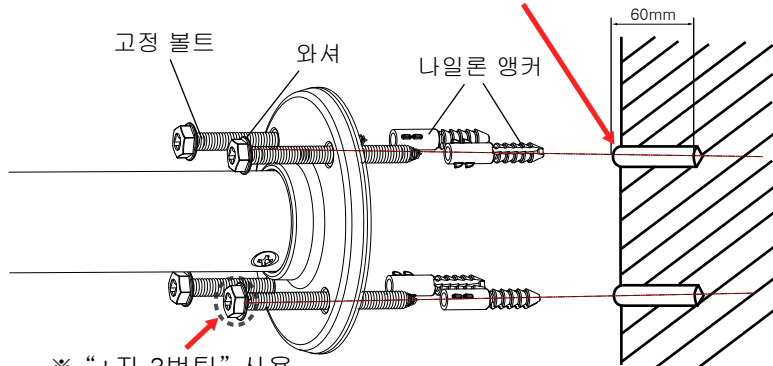

1. 시공하고자 하는 바닥 및 벽면에 플랜지를 밀착시킨 후 나사구멍 위치를 정확히 표시 하십시오.
(주의사항 : 나사구멍 위치가 정확하지 않을 경우 나사가 틀어져 조립되므로 주의할 것.)
2. 표시된 위치에 외경 9mm 전동드릴로 약 60mm 깊이의 구멍을 뚫어 주십시오.
3. 나일론 앵커를 구멍에 끼워 넣어 주십시오.
4. 고정볼트로 고정시 반드시 “+자 3번팁”을 사용하여 전동드릴로 완전히 고정시켜 주십시오,
(참고사항: “+자 2번팁”을 사용시 고정볼트의 +자 형상이 망가질 수 있습니다.)


3. 조립 방법

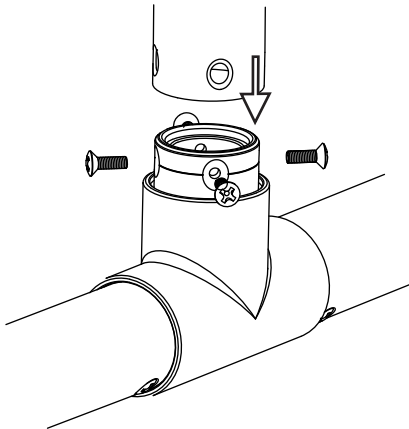


1. 파이프의 홀과 T-Adapter의 홀 위치를 맞춰 파이프를 T-Adapter에 끼워 넣어 주십시오.
2. 볼트를 이용하여 파이프와 T-Adapter를 완전히 조립 고정 시켜 주십시오.

4. 설치 완료도


- 수직형 대변기용 손잡이 (FC755-K)
- 수평형 대변기용 손잡이 (FC753-K)

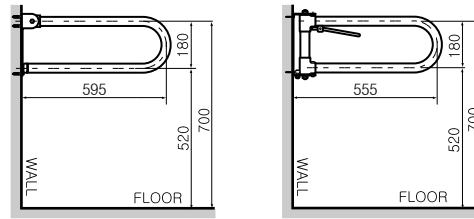


- 다용도 손잡이(FC751LA-K)

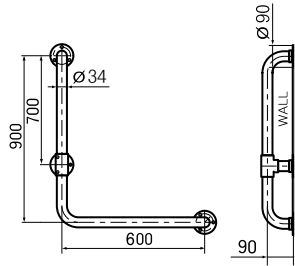

- 다용도 손잡이(FC751RA-K)

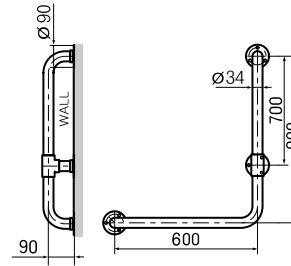


- 세면기용 손잡이 (FL762-K)

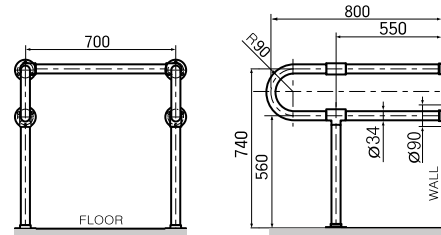


(지팡이 사용자용)

- 세면기용 손잡이 (FL761-K)

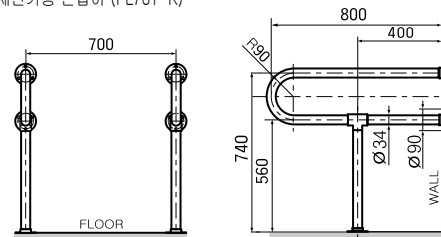


(휠체어/지팡이 사용자 전용)

- 소변기용 손잡이 (FU771-K)

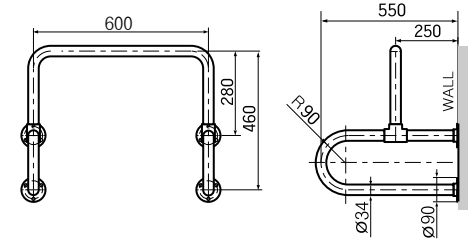

- T자 대변기용 손잡이 (FC752-K)

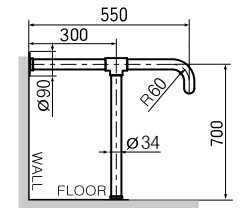

※시공주의사항

고정볼트를 사용시 정확한 위치에 시공하기 위해서는 브라켓을 고정할 수 있도록 1개의 구멍을 뚫어 가설치를 한 후에 나머지 위치를 표시 후 시공하면 정확한 위치에 설치할 수 있습니다.

A/S 안내

대림의 수전금구를 애용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.

1. 본 제품은 최선설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
2. 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
3. 신고 접수 즉시 당사 고객센터에서 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리해 드립니다.
4. 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다. (시공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모 등)



본사 · 영업부 : 서울특별시 서대문구 연희동 87-9번지 대림통상 B/D
TEL (02)730-9811~6
TEL (02)733-2218, 730-9871
FAX (02)733-7098, 730-9810

HOME PAGE : <http://www.dlt.co.kr>

충 북 영 업 소 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로23(마암리 1039)
TEL (043)838-8510
FAX (043)838-8510

영 남 영 업 소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307

충 부 영 업 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927

고객만족센터(A/S): ☎ 1 5 8 8 - 8 2 0 9 FAX : (02)725-8289